EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

nvec un détaillant **EZee Life** autorisé.

Si vous avez des questions concernant votre produit Ezee Life ou cette garantie, veuillez communiquer

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

remplacées périodiquemen

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être

détaillant.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre

fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Les produits de marque Ezee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de


Garantie limitée



CBP0105 CH2030 # Ref

Béquilles en aluminium Ajustement à bouton-poussoir Entièrement assemblées

97iJ 99Z3

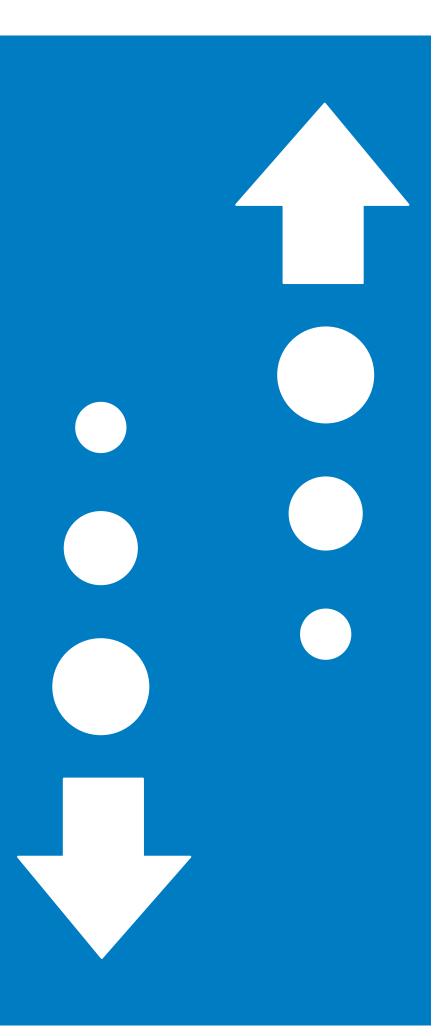

EZee Life

Aluminum Crutches Push-Button/Adjustable Fully Assembled

Item # MFG # CRP0105 CH2030



Limited Warranty

EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials.

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instructions set out above.

If you have a question about your **EZee Life** device or this warranty, please contact an authorized **EZee Life** dealer.

EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

EZee Life

Adjusting Handle Position

- 1. Do one of the following:
 - remove the wing nut and bolt securing the handle to the crutch (Detail "A") or
 - push both handle locks IN (direction of arrow stamped on side of handle lock) (Detail "B")
- 2. Align the handle with the desired set of adjustment holes.


Note: Quick Adjust Crutch – There will be an audible click when handle locks are fully engaged and secure.

- 3. If necessary, secure with wing nut and bolt.
- 4. Repeat for other crutch.


Adjusting the Leg Extension

Depress both snap buttons on the leg extension and allow them to snap through the desired adjustment holes on the crutch leg frame. Repeat for other crutch (Detail "C").


Detail "A" - Quick Change Crutch

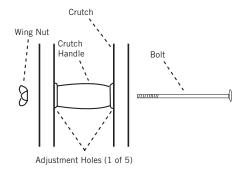

Detail "B" - Quick Adjust Crutch

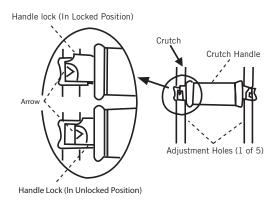


Detail "C" Leg Extension

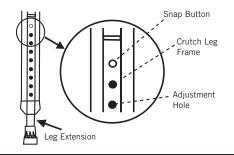

CAUTIONS:

- Use after proper training under the direction of your doctor or physical therapist
- Replace crutch tips if worn
- Keep hand grip wing nut tightened
- Use extra caution on wet and slippery surfaces
- Highest setting, armrest to floor: 45" 53"
- Patient height range: 5'2"- 5'10"
- Supports up to 300 Lbs

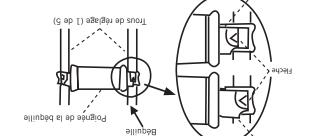


Détail « C » extension de patte

Cadre de la

Bouton à ressort

Détail « B » - Béquille à réglage rapide

Verrou de la poignée (en position verrouillée)

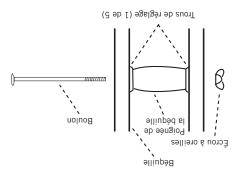

Détail « A » – Béquille à changement rapide

- Limite de poids de 300 lb (135 kg)
- Ecart de grandeur du patient : 5 pi 2 à 5 pi 10 (1,57 m à 1,78 m)
- Hauteur maximale, appuie-bras au plancher: 45 à 53 po (114 à 134 cm)
 - Ofilisez avec prudence sur les surfaces mouillées ou glissantes
 - Assurez-vous que l'écrou à oreilles de la poignée est bien serré
 - - Remplacez les embouts de la béquille s'ils sont usés by\alotyeksbente.
- Utilisez après avoir reçu une formation adéquate sous la supervision d'un médecin ou d'un

MISES EN GARDE:

béquille (détail « C »). sur le cadre de la béquille. Répétez pour l'autre laissez-les s'engager dans les trous de réglage désirés Entoncez les boutons-poussoirs sur l'extension et

Réglage de l'extension de la patte

- 4. Répétez pour l'autre béquille.
 - 'uojnoq un'b
- 3. Au besoin, fixez à l'aide d'un écrou à oreilles et

pleinement enclenchées et solidement en place entendrez un déclic lorsque les poignées sont Kemarque: Béquille à réglage rapide – Vous

- 2. Alignez la poignée dans les trous de réglage
- flèche sur le côté du verrou) (détail « B ») L'INTÉRIEUR (dans la direction indiquée par la poussez les verrous de la poignée VERS
- uo (« A » listèb) elliupèd al á eèngioq al retirez l'écrou à oreilles et le boulon qui fixent
 - 1. Procédez de l'une des façons suivantes:

Réglage de la poignée

97iJ 99Z3